

電子ビーム蒸着用温度コントローラ

SPC-MTC



機能


電子ビーム蒸着時のEmission 電流、Flux 電流もしくは温度を参照しながら、Filament電流をFeedback制御します。電子衝撃加熱用電源 EB-401とセットで使用します。専用ソフトにより、USB 接続された PC 上で自動・手動制御が可能です。また単体での制御も可能です。



背面

備考

入力電源： 90~240V
 熱電対センサ： K type, W-Re type
 PC との接続： USB
 OS： Windows 7 以降
 寸法： 幅 483× 奥行 350× 高さ 88mm
 (19インチラックタイプ、EIA ピッチ、2U)

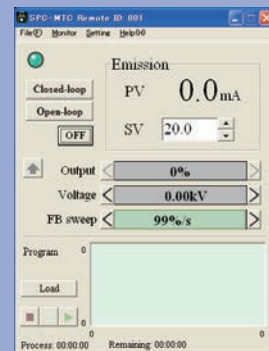

専用ソフト メイン画面

*仕様・概観などは予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。