


ULF-100 RF フィルタ


真空チャンバに繋がる回路、SPM コントローラ信号、温度コントローラなどの機器から輻射される高周波ノイズを低減することができます。より低ノイズな測定環境が必要な場合に使用します。

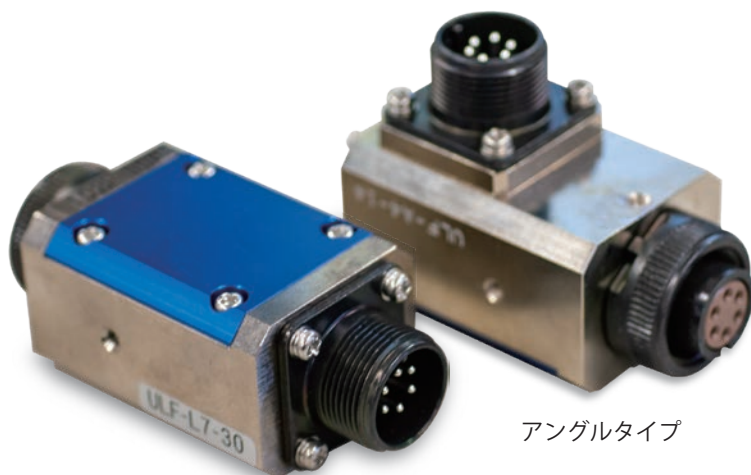

ストレータイプ

アングルタイプ

- ▶ 信号に含まれる高周波ノイズを効果的に低減できます
- ▶ 高エネルギーを必要とするトンネル分光測定に役立ちます
- ▶ サブmeVオーダーの解像度

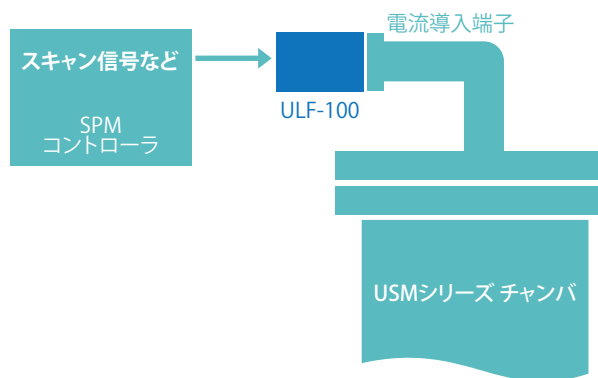

仕様

- 入出力：MS3106 プラグ 6 極ソケット
MS3102 レセプタクル 6 極ピン
- ※ 上記コネクタが直線に並んだストレータイプと 90° 傾斜したアングルタイプがございます。
- 寸法：幅 39× 奥行 32× 高さ 60mm
- フィルタ性能：カットオフ周波数 265k ~ 530kHz

*本製品はオプション品につき、ユニソクユーザー様への販売のみとなります。単体販売はできませんのでご了承願います。
*仕様・概観などは予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承願います。